


THERMOFORM[®]

Kompressen zur Kälte- und Wärmetherapie



THERMOFORM Softy-Pack
 Die Kalt/Warmkomresse aus hochwertigem, strapazierfähigen Nylongewebe. Langfristig wiederverwendbar, pflegeleicht. Aufladung als Kältekomresse in Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -20°C). Aufladung als Wärmekomresse in heißem Wasser.

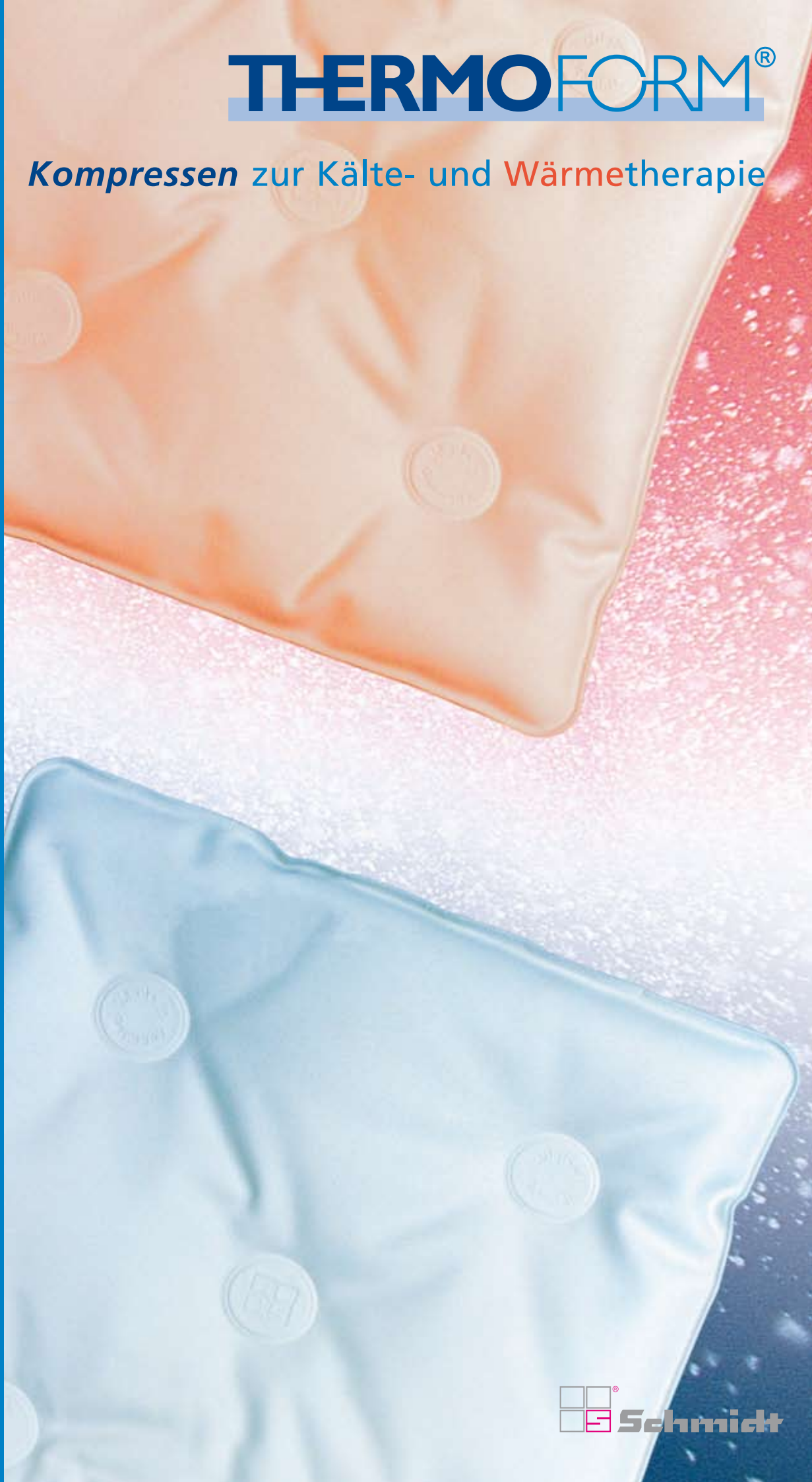

THERMOFORM Softy Pack
 12 x 15 cm # 1000
 15 x 24 cm # 1001
 24 x 30 cm # 1002

Kalt/Warmkompressen zur Schmerzlinderung

THERMOFORM Kalt/Warm
 Die Kalt/Warmkomresse aus transparenter PA/PE-Folie. Mehrfach verwendbar. Aufladung als Kältekomresse in Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -20°C). Aufladung als Wärmekomresse in heißem Wasser.



THERMOFORM Kalt/Warm
 13 x 14 cm # 11 051 (VE: 50 Stck)
 12 x 29 cm # 11 052 (VE: 25 Stck)
 30 x 40 cm # 11 055 (VE: 5 Stck)
 7,5 x 35 cm # 11 056 (VE: 40 Stck)

THERMOFORM Wärmflaschen für die Mikrowelle
 Überall wo Wärme zum Wohlbefinden beiträgt, sind diese Kissen unentbehrliche Helfer. Schnell und einfach entsteht in wenigen Minuten wohlige Wärme. Folienfarbe: blau solange der Vorrat reicht, anschließend rot



THERMO-STAR
 Wärmflasche für die Mikrowelle
 rund, Ø = 25 cm # 1502
 Passender Bezug, blau # 1505
 Wärmflasche + Bezug # 1500

1

Paraffinkompressen zur Wärme-Therapie

- **Hohe Verschleißfestigkeit (reißfest)**
- **Hygienisch (einfach zu reinigen)**
- **Hohe Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel**
- **Einfache Handhabung**



THERMOFORM Paraffinkompreße
24 x 32 cm
1020



THERMOFORM Paraffinkompreße
24 x 42 cm
1030



THERMOFORM Paraffinkompreße mit 2 Bändern für Hals und Gelenke
10 x 30 cm
1040



THERMOFORM Paraffinkompreße mit 4 Bändern für den Schulterbereich
1050

Beispielhafte Indikationen:

- Durchblutungsstörungen
- Prellungen, Zerrungen
- Verstauchungen
- Wirbelsäulen- und Bandscheibenschäden
- Muskelverspannungen
- Ischias
- Rheumatische Erkrankungen

THERMOFORM Paraffinkompressen ermöglichen eine hygienische und preiswerte Wärmeteilbehandlung – professionell in der Praxis oder im Hause des Patienten.

Für alle THERMOFORM Paraffinkompressen wird ein hochwertiges und extrem flexibles Folienmaterial verwendet, das eine sichere, angenehme und körperfreundliche Anwendung der Produkte ermöglicht. Paraffin besitzt eine hervorragende und unvergleichliche Wärmewirkung. Der spezielle Schmelzpunkt des Paraffins gewährleistet eine besonders gleichmäßige Wärmeabgabe über den gesamten Behandlungszeitraum hinweg.

2

Moor/Fangokompressen zur traditionellen Schmerztherapie

THERMOFORM Einweg-Moorkompreße
Reich an Huminsäuren, Östrogenen, Gerbsäure und Mineralsalzen zur Anwendung als partielle Moorpackung direkt auf der Haut.
ca. 30 x 40 cm # 1220



Moor und Fango spielen in der therapeutischen Wärmeanwendung eine traditionelle Rolle. Auf Grund des hohen Wasserbindungs- und Wärmespeichervermögens wird der erhitzte Moor- bzw. Fangobrei mit höherer Temperatur als Wasser auf der Haut ertragen und gibt seine Wärme kontinuierlich über einen längeren Zeitraum ab. Als Wärmeträger empfehlen wir Artikel # 1030.

THERMOFORM Einweg-Fangokompreße
Vulkanischer Mineralschlamm für partielle Fangopackungen zur Therapie von rheumatischen Erkrankungen oder Organbeschwerden.
ca. 40 x 60 cm # 1221

3

Kompressenwärmer für Paraffinkompressen



2030

Kompressenwärmer für bis zu 10 Kompressen im Wasserbad. Der Kocher (230V, 1800 W) verfügt über einen Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockenschutz, Kontrolllampe und Kabelaufwicklung. Der Topf verfügt über eine 2-Schicht-Emaillierung mit Edelstahlrand, einen geschlossenen Topfboden und einen Einlegerost aus Edelstahl mit Rislan®. Die Griffe sind wärmeisoliert.
Farbe: weiß/blau
2030

Eiskompressen für die Kryotherapie

- Sicherheit durch dublierte Folie
- Spezial-Gel für dosierte Kälteabgabe
- Flexibel bis -20°C
- Einfache Handhabung: Lagerung im Gefrierfach
- Hygienisch, desinfizierbar
- Dauerhaft wiederverwendbar (Kostenaspekt)

Beispielhafte Indikationen:

- Muskel- / Gelenkentzündungen
- Rheumatischer Formenkreis
- Prellungen
- Verstauchungen
- Zerrungen
- frische Verletzungen
- Nasenbluten
- Venenentzündungen
- Thrombose
- Kopfschmerz / Migräne

Kontraindikationen:

- Arterielle Durchblutungsstörungen
- Raynaud Syndrom (blaue Fingerspitzen)

THERMOFORM Eiskompressen wurden entwickelt für Indikationen, bei denen eine Kryotherapie angezeigt ist. Die dauerhaft wiederverwendbare Komresse ist mit einem *Spezial-Gel* gefüllt, das die Kälte extrem lange speichert und eine genau dosierte Kälteabgabe gewährleistet. Darüber hinaus bleibt die Thermoform Eiskomresse bis -20°C flexibel, was das Handling erleichtert und die Anpassung an die zu therapierenden Körperteile in idealer Weise ermöglicht. Die Kälteaufladung erfolgt ganz einfach im Gefrierfach.



THERMOFORM Eiskomresse 22 x 22 cm # 1110

THERMOFORM Eiskomresse 24 x 32 cm # 1120

THERMOFORM Eiskomresse 24 x 42 cm # 1130

THERMOFORM Hals-Eiskrawatte mit 2 Bändern für Hals und Gelenke für Erwachsene 10 x 30 cm # 1140

THERMOFORM Hals-Eiskrawatte mit 2 Bändern für Hals und Gelenke für Kinder 7 x 25 cm # 1150



THERMOFORM Eiskomresse mit 2 Bändern für Arm- und Beinbehandlung 24 x 32 cm # 1160

THERMOFORM Schulter-Eiskomresse mit Bändern # 1190

THERMOFORM Bezüge (weiß) für Eiskomresse 1110 # 1401
für Eiskompressen 1120, 1160 # 1402
für Eiskomresse 1130 # 1403
für Eiskomresse 1140 # 1404

THERMOFORM Fixierbandagen für Eiskompressen 60 x 7,5 cm # 1301
70 x 7,5 cm # 1302
90 x 7,5 cm # 1303
120 x 15 cm # 1304
100 x 11 cm # 1305 (mit Tasche wie Abb.)

IceCap für die Haarausfallprophylaxe bei Chemotherapien

Ein unerwünschter Nebeneffekt bei Chemotherapien von malignen Tumoren und Metastasen führt in vielen Fällen zum vollständigen Haarausfall bei den Patienten. Dies ist besonders für Frauen eine über die Krankheitssymptome hinaus zusätzliche seelische Belastung.

Durch eine gezielte Unterkühlung der Kopfhaut und die damit einhergehende Ischämie, hervorgerufen durch Kontraktion der die Kopfhaut versorgenden Kapillaren, wird die Wirksamkeit der eingesetzten Medikamente in diesem Bereich auf ein Minimum reduziert. In den meisten Fällen ist eine Unterkühlungstherapie mit dem THERMOFORM IceCap erfolgreich.

Die THERMOFORM IceCaps haben eine anatomische Passform für alle Kopfgrößen.



THERMOFORM IceCap Set mit Klettband und Isolierhaube # 1180



THERMOFORM IceCap mit Klettband # 1181

IceCap Isolierhaube (einzeln) # 1182

Die B.u.W. Schmidt GmbH fertigt seit 1961 in Garbsen nahe Hannover Präzisionsprodukte aus hochfrequenzverschweißten Flachfolien für das Kranken- und Rettungswesen. Einwandfreie Qualität und Verarbeitung, leichte Handhabung und robuste Materialien sorgen für die kompromisslose Sicherheit unserer Produkte.

Unser Service gewährleistet kurze Lieferzeiten und schnellen Reparaturdienst in unserem Werk.

Die B. u. W. Schmidt GmbH ist zertifiziert nach EN ISO 9001:2000 und EN ISO 13485:2000; alle Artikel entsprechen dem Medizinprodukte-Gesetz und sind CE-gekennzeichnet.

Sprechen Sie uns auf Sonderanfertigungen an, wenn Sie gewünschte Artikel oder Abmessungen in diesem Prospekt nicht finden. Mit unserer computergestützten Produktionsanlage sind wir in der Lage, Ihre Vorstellungen in allen Größen bis zu 150 x 250 cm individuell zu realisieren.

Vertrieb durch:



Produkte und Dienstleistungen für Klinik und Praxis

Medizin Service Becker GmbH
An der Bleiche 4
D - 55469 Simmern
Telefon: 0 67 61 / 967 26 48
Telefax: 0 67 61 / 903 72 76



Kunststoffzeugnisse für das Kranken- und Rettungswesen

B. u. W. Schmidt GmbH
Porschestraße 29
D-30827 Garbsen
Telefon: +49 - (0) 51 31 / 60 08
Telefax: +49 - (0) 51 31 / 9 63 93
E-Mail: mail@buwschmidt.com
Internet: www.buwschmidt.com

Technische Änderungen vorbehalten